



Índice Ficha do Paciente

Considerações gerais	3-1
Visualização de pacientes	3-1
Funções	3-1
Funções	3-2
Registar paciente (Menu paciente)	3-2
Eliminar registo paciente (Menu Paciente)	3-2
Regressar ao paciente anterior.....	3-2
Avançar para o paciente seguinte	3-2
Guardar dados do paciente (Menu Paciente).....	3-2
Criar registo para novo paciente (Menu Paciente)	3-2
Editar registo paciente (Menu Paciente).....	3-3
Cancelar modificações (Menu Paciente)	3-3
Eliminar paciente (Menu Paciente)	3-3
Recolher informações (Menu Paciente)	3-3
Imagem do paciente	3-4
Leitor de cartões	3-4
Campos adicionais.....	3-4
Importar paciente	3-5
Procurar paciente.....	3-5
Resumo de imagens	3-6
Visualizar imagens.....	3-6
Imagens de vídeo	3-6
Imagens intra-orais	3-7
Imagens extra-orais	3-7


Ficha do paciente

Considerações gerais

A ficha do paciente permite a introdução, alteração, eliminação e selecção de dados relativos a pacientes.

As respectivas fichas contêm todos os dados relativos aos pacientes, bem como uma perspectiva geral das imagens existentes.

Visualização de pacientes

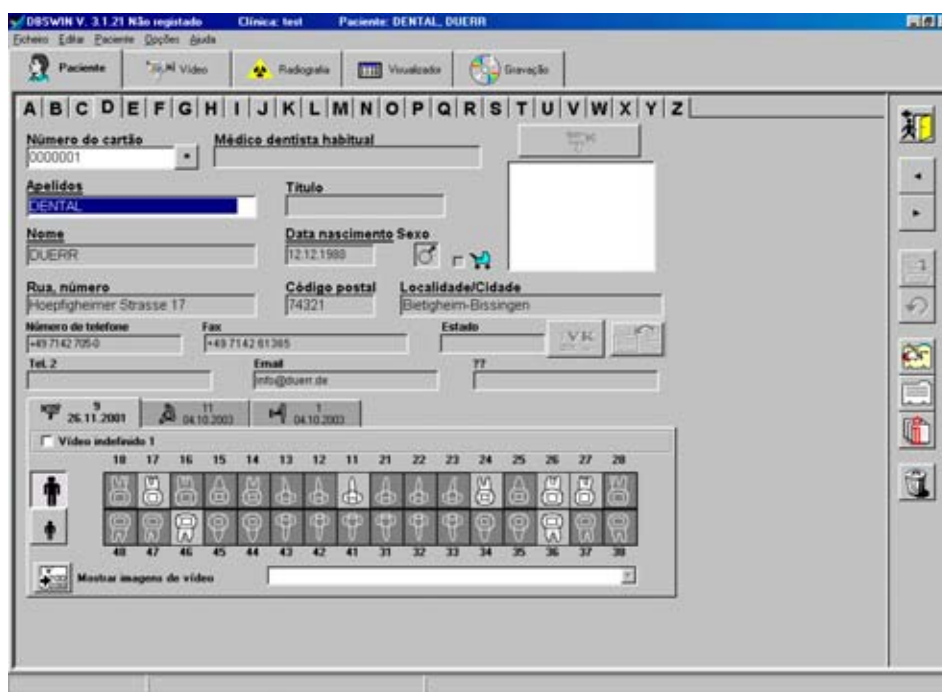

Funções



Registrar paciente (Menu paciente)

Um clique neste botão permite registar o paciente nesse momento seleccionado em DBSWIN e apresentar os seus dados na barra de estado. Esta informação começa a piscar sempre que seja seleccionado um outro paciente que não tenha sido registado. É possível agora executar todas as funções para o paciente seleccionado (realizar a recolha de imagens, ver imagens no visualizador, etc.). É muito fácil voltar a seleccionar o paciente previamente registado, bastando para tal clicar no botão luminoso intermitente existente na barra de estado, sem necessidade de nova procura do paciente.

O botão *Registrar / Eliminar Registo Paciente* volta a indicar *Eliminar Registo Paciente*.

Sempre que seja seleccionado e registado um novo paciente, este é indicado na barra de estado.

Os pacientes importados de fontes externas são sempre registados!



Eliminar registo paciente (Menu Paciente)

É eliminado o registo do paciente actual e são esvaziados todos os campos de dados.



Regressar ao paciente anterior



Avançar para o paciente seguinte





Guardar dados do paciente (Menu Paciente)


Memorização das entradas realizadas.



Criar registo para novo paciente (Menu Paciente)

Para criar um registo para um novo paciente, clique sobre o símbolo  no modo de *Visualização Paciente*.



Preencha os campos disponíveis. Guarde os dados do paciente seleccionando o botão . Os campos *Nome*, *Apelidos* e *Data de Nascimento* são de preenchimento obrigatório. Um sombreado vermelho num campo obrigatório assinala que o mesmo foi preenchido de forma incompleta ou incorrecta.

Existe também a possibilidade de suspender ou cancelar a recolha de dados com um clique sobre o símbolo .

Sempre que se encontre instalado um leitor de cartões, deverá aí ser introduzido o cartão do seguro médico e seleccionado o símbolo  para que os dados do paciente sejam assumidos.



Editar registo paciente (Menu Paciente)

Um clique no símbolo  permite-lhe editar os dados do paciente. As modificações podem ser guardadas através de um clique no símbolo .




Cancelar modificações (Menu Paciente)

Abandona o modo de edição sem guardar as entradas.



Eliminar paciente (Menu Paciente)



Para eliminar um paciente, seleccione-o a partir da base de dados e clique sobre o símbolo . O paciente seleccionado é então eliminado da base de dados activa.


Sempre que existam na base de dados imagens do paciente, durante o processo de eliminação é chamada a sua atenção para o facto de não ser possível suprimir o paciente, caso existam imagens radiográficas de conservação obrigatória ou registos de imagem guardados. Neste caso o paciente é apenas ocultado, ou seja, deixa de ser apresentado.

Para que possa voltar a seleccionar um paciente oculto, deve optar pelo marcador *Apresentação de Pacientes Ocultos* em *Configuração/Módulos/Paciente/Ficha:Paciente*. Deste modo, também os pacientes ocultos serão alvo de visualização na lista de busca (+ na coluna *Oculto*). O atributo *Oculto* é apagado no momento em que um paciente oculto seja novamente seleccionado. O paciente volta então a estar visível!




Recolher e alterar informações (Menu Paciente)

Relativamente a cada paciente, é possível recolher ou alterar informações adicionais no modo de edição , como por exemplo alergias ou outros dados, mediante um clique sobre o símbolo .

Ao lado do botão  aparece sempre o conteúdo da primeira linha de texto (a1), caso esteja seleccionada a caixa de verificação *Informações adicionais* em *Config/Módulos/Paciente/Paciente/*.

Janela de informação

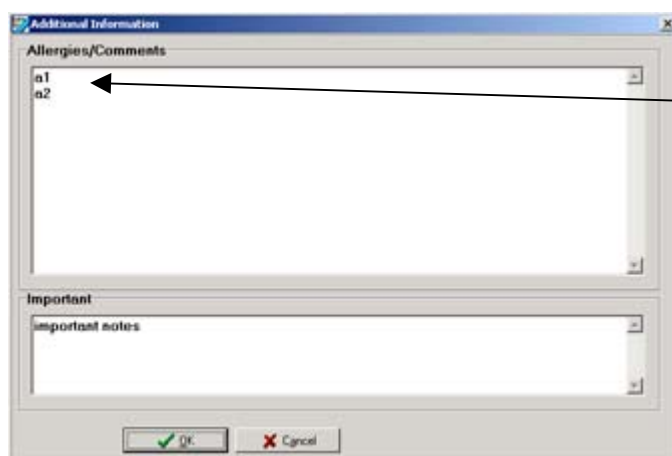




Informações adicionais visualizadas ao lado do botão.



Imagem do paciente

O registo de vídeo possibilita tirar uma fotografia tipo passe do paciente. Porém, a criação da imagem só pode ter lugar no modo de edição.

A imagem pode ser gravada directamente com uma fonte de vídeo existente  ou transferida de um ficheiro de imagem existente  (BMP, JPEG, TIFF) ou apagada .



Leitor de cartões

Nem todos os países utilizam o cartão do seguro médico, pelo que é possível suprimir o botão de leitura de cartões e os campos com os dados do seguro. Isto consegue-se através dos **ajustes** da ficha do paciente, a realizar no processo de configuração.

É possível a ligação de um leitor de cartões externo a uma interface de série ou a utilização de um teclado de leitor de cartões do tipo 'Cherry 1501'. De qualquer modo é necessário começar por configurar o leitor de cartões adequado. Para este efeito, seleccione no menu *Opções* a página de *Configuração* e dê início aos **Ajustes do leitor de cartões**.

Os leitores de cartões externos têm de ser configurados para um funcionamento baseado em caixas de diálogo conjuntamente com o PC, sendo necessária a aplicação de um cabo de ligação adequado.

No caso do **teclado do tipo Cherry**, devem ser instalados os controladores fornecidos pelo fabricante.

Os **teclados de leitores de cartões Cherry** dispõem também de um interruptor de selecção de modo, que deve ser colocado em Mode1. Atenção: a comutação ocorre apenas após um novo arranque!

Para mais informações deverá consultar o manual do fabricante.

O leitor de cartões não pode ser usado para alterar os dados de um paciente já existente.

No modo de procura:

Introduza o cartão do seguro médico na ranhura e seleccione o botão do leitor de cartões. Caso este paciente já conste da base de dados, será por este meio seleccionado.

Caso contrário, o sistema passa ao modo de edição e os dados do cartão são introduzidos nos respectivos campos. Necessita depois apenas de pressionar o botão *Guardar* (o processo pode ser interrompido), após o que o paciente fica definitivamente gravado na base de dados.

Criar registo para novo paciente:

Para introduzir os dados de um novo paciente por meio do leitor de cartões deverá seleccionar **Paciente novo**, introduzir o respectivo cartão na ranhura e seleccionar o **botão do leitor de cartões**. Depois, esta operação necessita apenas ser guardada.

Campos adicionais

Para além dos campos de dados pré-definidos, existem à sua disposição quatro campos adicionais de definição livre, cujo preenchimento ficará ao critério do utilizador, podendo-lhes ser atribuídos, por exemplo, o número de fax ou o endereço electrónico do paciente.

O campo adicional número 1 encontra-se junto ao número de telefone, enquanto que os restantes três se situam acima do resumo das imagens.


É possível determinar um título para cada campo e a respectiva visualização. Estas configurações têm lugar em **Propriedades** da ficha do paciente, sendo acessíveis por exemplo mediante um clique no botão direito do rato em qualquer local da ficha.



Importar paciente

Este botão permite transferir dados de pacientes a partir de outros programas, por exemplo do departamento de gestão da clínica (regulações em **Configuração/ Módulos/ Paciente**).


Os dados são transferidos mediante selecção do botão circundado a vermelho, e o paciente, quando já existente, é por esse meio seleccionado. Caso ainda não exista um paciente com dados idênticos, passa-se ao modo 'Criar Registo para Novo Paciente'.

Se existir um paciente com nome idêntico, mas com um número de ficha diferente, passa-se ao modo 'Editar o Registo do Paciente'. Finalmente, é necessário pressionar o botão  para transpor as alterações para a base de dados.

Procurar paciente

A pesquisa de um paciente na base de dados pressupõe um clique sobre o separador da ficha com a letra inicial do nome do paciente. A janela de busca apresenta então todos os pacientes cujo nome se inicie com esta letra. Pode agora pesquisar nesta lista e seleccionar o paciente desejado. Caso a lista contenha vários registos, recomenda-se que introduza no campo **Texto de procura** outros elementos do nome. Inicie a procura mediante a selecção do botão **Procurar**. É igualmente possível introduzir no campo de procura o número da ficha como critério de busca, proporcionando-se deste modo a selecção de pacientes através do respectivo número pessoal.

Também lhe é dada a possibilidade de introduzir no campo **Apelidos** no modo de visualização *Paciente* o nome procurado, ou no campo *Número da Ficha* o número desejado. Para iniciar a busca, seleccione a **Tecla de introdução**.

Um clique sobre o separador  resulta na apresentação de todos os pacientes.

Atenção: o número da ficha é uma sequência de símbolos com um máximo de 15 caracteres, processados da esquerda para a direita! Por exemplo: a sequência de símbolos de busca 001T-A0 dá origem a uma lista de resultados 001T-A0*, sendo * um símbolo arbitrário!

Resumo de imagens

Na secção inferior da ficha encontra-se o painel de controlo 'Resumo de imagens', que permite, para além da visualização de registos de imagem já existentes do paciente actual, transpor rapidamente para o visualizador imagens de determinados dentes ou de dado tipo.


Em cima, nos separadores, junto ao símbolo de tipo de imagem, encontra indicação dos registos existentes deste tipo de imagem. A data da última imagem deste tipo é visualizada abaixo. Para visualizar uma ficha, basta seleccionar o respectivo separador.

É indicada a quantidade de imagens indefinidas do tipo de imagem actual.


Registos de imagens isoladas são assinalados através de um dente destacado a cor.

Existe uma página para imagens de vídeo, uma para imagens intra-orais e outra para extra-orais.

Visualizar imagens

Cada página do Resumo de imagens possui um botão , que permite passar ao visualizador e aceder no quadro de selecção de imagens ao registo de todas as imagens deste tipo (todas as imagens de vídeo, todas as imagens intra-orais ou todas as imagens extra-orais). Este botão só pode todavia ser seleccionado caso o paciente possua registos de imagem deste tipo.


Através de um clique sobre *Xray UNDEF* ou *Video UNDEF* o utilizador é transferido para o visualizador, onde são apresentadas todas as imagens indefinidas do tipo de imagem actual (Vídeo, Raio-X) no quadro de selecção de imagens. O campo estará apenas disponível se existirem registos deste tipo de objectos de imagem para o paciente em questão.

As páginas para imagens de vídeo e intra-orais apresentam um esquema dentário, no qual os dentes para os quais existem registos de imagem se encontram destacados a cor. Outros tipos de objectos de imagem são apresentados numa lista de selecção , que estará disponível apenas se existirem registos do respectivo tipo de objectos de imagem para o paciente em questão.

A página para imagens extra-orais apresenta todas as imagens extra-orais em três listas de selecção.


Um clique sobre um dente ou um registo numa lista de selecção permite passar ao visualizador e aceder no quadro de selecção de imagens ao registo de todas as imagens deste tipo de objecto de imagem.

Imagens de vídeo

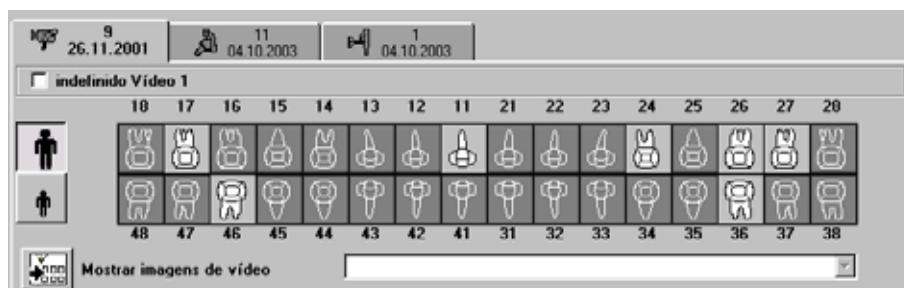


Esta página mostra um esquema dentário que compila todas as imagens de vídeo isoladas de dentes do paciente. Os dentes, para os quais existam registos de imagem, apresentam-se destacados a cor.

Imagens intra-orais

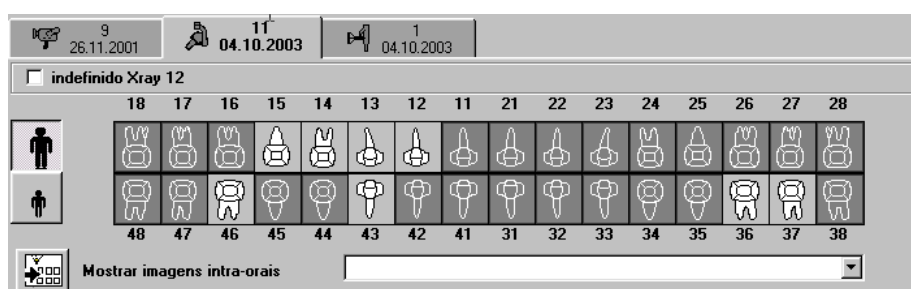

Esta página oferece um esquema dentário que reúne todas as imagens intra-orais isoladas de dentes do paciente. Os dentes para os quais existam registos de imagem, apresentam-se destacados a cor.

Imagens extra-orais

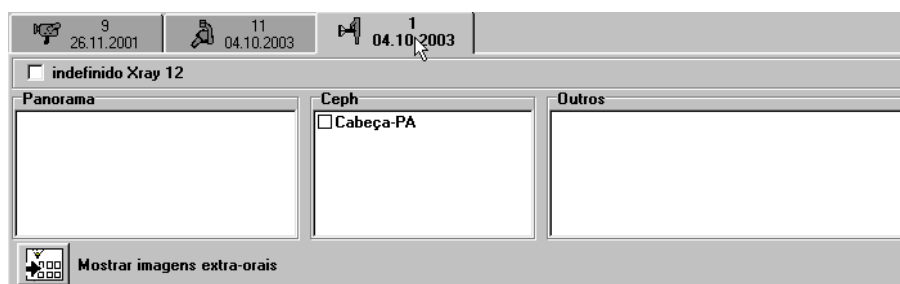

Todos os tipos de objectos de imagem atribuídos são apresentados em três caixas de listas.