
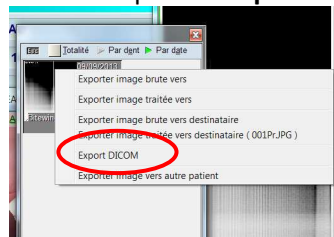



Mise à jour Julie 3.31.0.(55)

Cher Docteur,

Vous venez d'effectuer avec succès la mise à jour de votre logiciel Julie. Veuillez trouver ci-dessous le récapitulatif de l'installation :

- Mise à jour : UPD331_55
- Date de la version : 26/09/2013
- Version d'origine du programme : de la version 3.31.0.1 à la version 3.31.0.53
- Version résultante du programme : 3.31.0 (55)

Mise à jour de la table des organismes destinataires CPAM V.3.42	
Mise à jour de la table mutuelle	
Mise à jour CCAM V31	
Module « Imagerie » 	
Exportation d'une radio au format DICOM	<ul style="list-style-type: none"> - Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la radio à exporter puis sélectionnez l'option « Export DICOM »  <ul style="list-style-type: none"> - Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer l'image.
Lors de l'impression d'un status, la date d'acquisition est imprimée sur les radios.	
Nouveaux filtres de contraste et de rehaussement pour les images panoramiques acquises avec les unités « IMAX TOUCH » et « IMAX TOUCH 3D ».	
 <p>ce bouton permet d'appliquer un filtre prédéfini.</p>	
<p>Pour effectuer le réglage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce bouton.</p> <p>Ouverture de la fenêtre ci-dessous :</p>	

Utilisation du filtre de rehaussement


Les 3 boutons sont pré-paramétrés mais peuvent néanmoins être modifiés :

Pour paramétrer un filtre, cliquez sur le bouton à modifier puis déplacez le curseur sur la réglette.

Une fois les réglages effectués, cliquez sur le bouton de votre choix pour appliquer le filtre de rehaussement sur la radio.

⚠ : En l'absence de paramétrage, les filtres appliqués seront les filtres de niveau 2.

Ce bouton permet d'annuler le filtre de rehaussement.

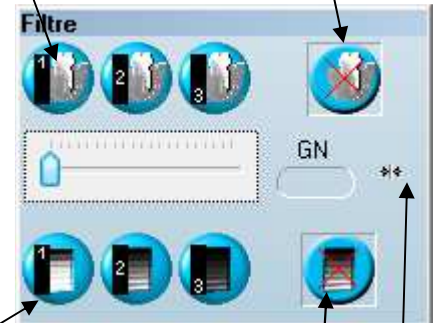

Utilisation du filtre de contraste

Les 3 boutons sont paramétrés par défaut.

Cliquez sur le bouton de votre choix pour appliquer le filtre de contraste sur la radio.

Ce bouton permet d'annuler le filtre de contraste.

Ce bouton permet d'annuler le filtre de rehaussement et le filtre de contraste. Retour à l'image d'origine sans traitement.

⚠ : Quand ce filtre est activé, les filtres de gamma, luminosité et contraste sont désactivés.



⚠ : Si vous avez activé l'option « **Menu Utilitaires / Options / Onglet « Radios » / « Filtrer l'image intra-orale** », l'ancien filtre de rehaussement sera appliqué (🔍) automatiquement lors de l'acquisition pour les images provenant des capteurs intra-oraux Owandy.

Si vous avez activé l'option « **Menu Utilitaires / Options / Onglet « Radios » / « Filtrer l'image panoramique** », l'ancien filtre de rehaussement sera appliqué (🔍) automatiquement lors de l'acquisition pour les images provenant des panoramiques « **IMAX Plus** » et « **IMAX Easy** ».

Le nouveau filtre sera appliqué pour les images acquises avec les unités « **IMAX TOUCH** » et « **IMAX TOUCH 3D** ». Concernant l'**IMAX TOUCH**, cliquer sur le filtre de niveau 3 sans contraste pour appliquer les caractéristiques de l'ancien filtre.